

Paso a paso Recarga de Software Mindray, Serie Consona




Paso 1

Seleccionar y descargar la versión de software compatible y que se necesita para el equipo correspondiente



Paso 2

Formatear el dispositivo de almacenamiento USB a formato FAT32

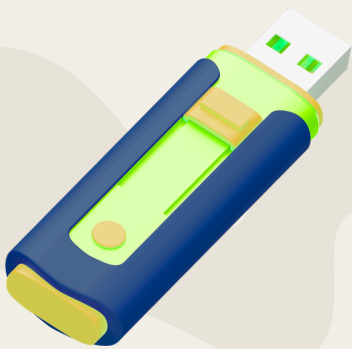

Paso 3

Descomprimir los archivos y pasar el archivo principal del sistema operativo a la raíz de la usb



Paso 4

Colocar los archivos del programa doppler en la carpeta que está vacía y con el nombre de Doppler



Paso 5

Realizar un “Check tool” 2 veces




Paso a paso Recarga de Software Mindray, Serie Consona



Paso 6

Si es necesario, transferir a una unidad de almacenamiento externa los datos (Estudios, pacientes, etc) presentes en el disco duro del ultrasonido.

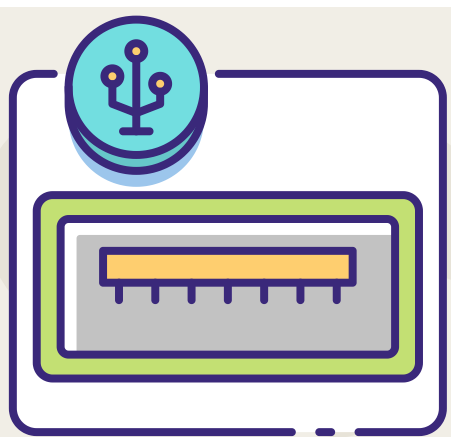


Paso 7

Apagar el equipo y colocar la USB en el puerto correspondiente (Observando el equipo por la parte de atrás es el puerto de la derecha)

Paso 8

Energizar el equipo, encenderlo y una vez que entre el programa seleccionar la opción que corresponda a lo que se necesite, ya sea formatear el disco duro por completo o conservar los datos de este.

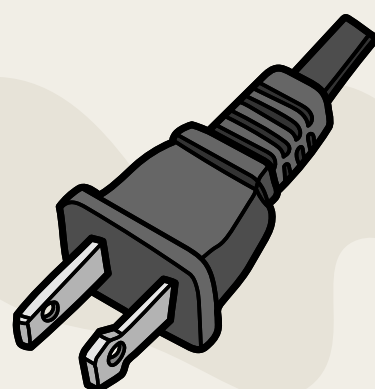

Paso 9

Encender el equipo, seleccionar la opción dejar correr el programa, estando atento a las indicaciones que presenta el equipo durante el proceso

Paso 10

Una vez terminado el proceso, apagar el equipo, esperar aproximadamente 15 segundos, retirar la USB y encender de nuevo



Paso 11

Por último, una vez encendido el equipo corroborar que se instaló correctamente la versión del software entrando con la tecla F10 y en el apartado "about".