

Paso a paso Mantenimiento Preventivo Impresora de Rayos X Drypix Lite, FUJIFILM



Paso 1

Energizar y encender el equipo. Realizar una prueba de calibración/impresión para evaluar su estado y funcionamiento.




Paso 2

Desarmar el equipo cuidadosamente, identificando la ubicación de cada componente y sus tornillos.



Paso 3

Limpiar la tarjeta madre. Retirar la cubierta protectora, sujetar el ventilador y aplicar aire comprimido a una distancia segura para evitar daños por condensación.

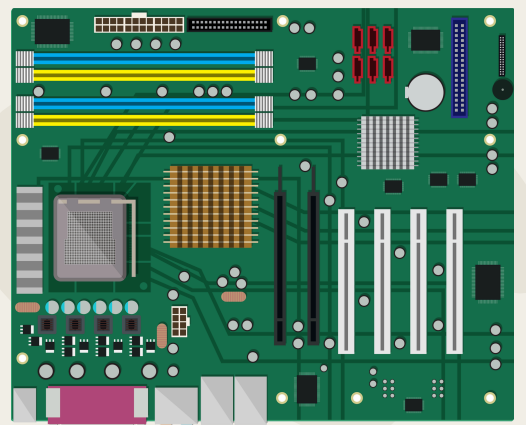

Paso 4

Limpiar los demás componentes, incluyendo ventiladores, cabezales, rodillos y cubiertas.



Paso 5

Reensamblar el equipo y ejecutar nuevamente la prueba de calibración/impresión para verificar su correcto funcionamiento.



Paso 6

Ingresa al modo de servicio y restablecer a cero el contador interno del inventario de películas

