


PASO A PASO PARA REVISIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DE PACIENTE (UMEC10, UMEC12, EPM12, EPM10)

1

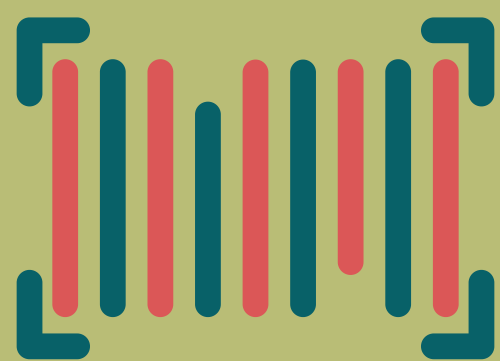

Verificación Inicial

Abrir la caja y confirmar que el número de serie del equipo coincide con el indicado en el empaque.


2



Revisión de accesorios

Revisar la caja de accesorios: confirmar que estén completos y en buen estado físico.

3

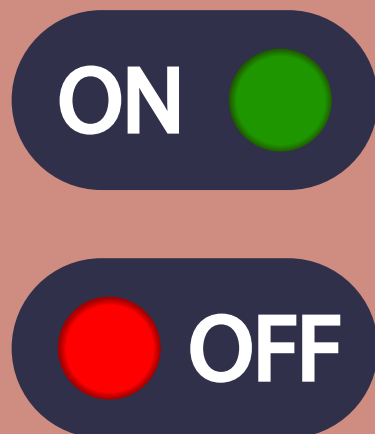

Encendido y configuración

Energizar y encender el equipo. Calibrar la pantalla táctil (si aplica) y actualizar fecha y hora al momento de la revisión.


4



Prueba con simulador de paciente

Conectar el simulador de paciente y verificar la calibración de cada parámetro (ECG, SpO2, Temperatura, PANI, PAI, Capnografía). Realizar mínimo 5 mediciones por parámetro, por encima y por debajo del rango normal, con un margen de tolerancia de ± 3 unidades.

5

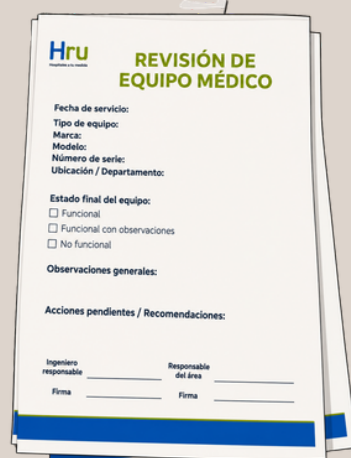

Documentación y cierre

Completar la hoja de revisión, indicando: estado de los accesorios, funcionalidad del equipo y confirmación de la prueba con simulador de paciente.